



UnicLine[®]

Flexibilitet och individuell design gör Er behandlingsenhet till en aktiv medarbetare.



2

Kvalitet bör inte vara ett önskemål. Kvalitet är en självklarhet.



3

Full kontrol - med foten.


Den patenterede runda fotkontrol (endast UnicLine 5D) kan användas från all sidor med höger eller vänsterfoten och frigör Er från fastlåsta arbetspositioner. Fotkontrollen styr hastighet och intensitet på utvalt instrument. Tryck på fotkontrollens mellanring aktiverar sprayval, kraftig mekanisk chipblås samt vänder rotationsriktningen på micromotorn. Toppen på fotkontrollen aktiverar OP-lampa eller signal för assistans.



UnicLine kan även levereras med konventionell variabel fotkontroll.



Låt möjligheterna vara öppna - varje dag.

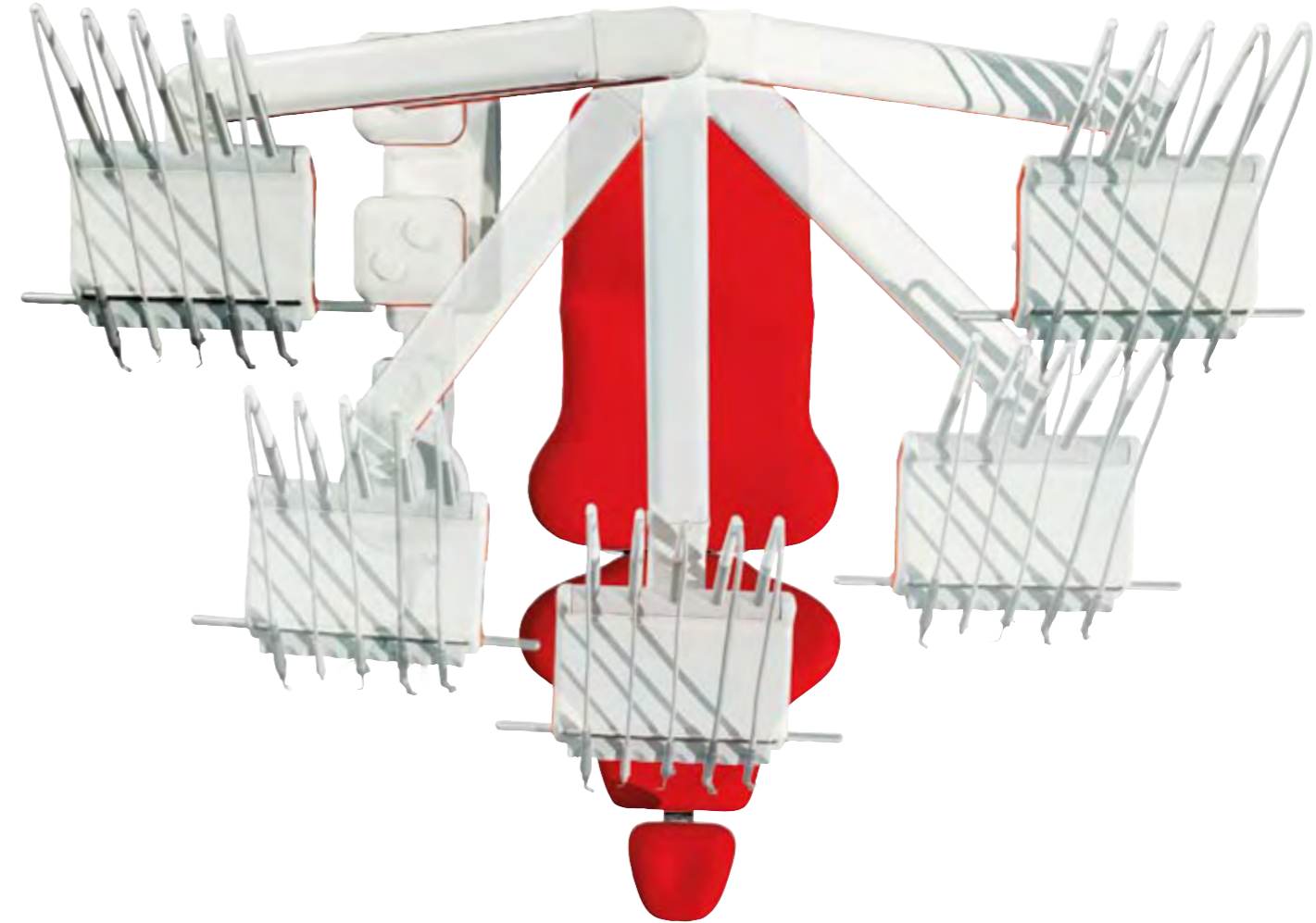



Överblick

Displayen som på ett enkelt sätt skapar en snabb överblick över aktuell inställning.

Valfrihet

Unicline 5D leveres med 3 til 6 balanse eller underopphengte instrumenter individuelt plassert. Du kan velge mellom 25 instrumentvarianter, som styres via den patenterte fotkontrollen.

Valfri instrument-placering

Alla instrumenter kan placeras på alla platser på instrumentbordet.

Tastatur

Tastaturet med hjålp-funktionerna är placerat på instrumentbordet och styr timerfunktion, ljushårdningstider, signal för assistenthjålp och fontånfunktioner.



Ergonomi

I bryggfunktionen är det enskilda instrumentet individuelt avbalanserat, och de långa silikon-slangarna ger ergonomisk riktiga arbeidsmåligheter.

Vi har alla olika ideer och önskningsar. Flexibilitet handlar blandt annat om anpassning. Därför är varje behandlingsenhet individuellt framstald för at passa dina behov.





Genomspolningssystem för instrument
För att säkra tillförseln av friskt vatten kan UnicLine levereras med automatisk vattengenomspolning av instrumenten.

Hygienisk vandurluftning
UnicLine kan levereras med hygienisk urluftning som hindrar alg tillväxt.


De avtagbara handtagen i aluminium kan autoklaveras.



Instrumentlägget är lätt avtagbart för rengöring.



UnicLine 5D
- enkelbricka.
- dubbelbricka.

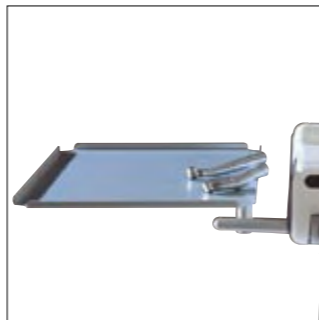

Varför kompromissa med material, när det idag finns en behandlingsenhet i aluminium, en säkerhet för livslång kvalitet.



UnicLine multimedia
UnicLine med monitor för
patientvänlig visning
av intraorala bilder, video,
digital röntgen eller
annan form av IT media.



Flexibilitet handlar blandt
annat om anpassning.



10



11



12

UnicLine
en elegant,
funktionell
och tidlös
design, med
omtanke
om miljön.



13



14

UnicLine 5D
kan ställas om
för höger- eller
vänsterhänt
behandling.



15



Ljus med
inbyggd
stabilitet.



UnicLine lampan ger ett
optimalt behandlingsljus.
Lamphuvudet är placerat
på en självbalanserad
fjäderarm som säkrar en
stabil position.

16

Fri placering.

UnicLine Cart

Cart versionen har samma funktioner som UnicLine.
Behandlingsenheten är uppbyggd i solid aluminiums-
profil med dolda hjul.
Arbetshöjden kan manuellt justeras till valfri höjd,
sittande eller stående.



UnicLine Cart



Stolsmonterad fontän
Stolsadaptern passar till
UnicLine patientstol, och
ger en svängbar fontän
med sughållare, brickbord
och operationslampa.




UnicLine pelare


17

Patienthygien

Uniclne kan levereras med automatisk rensystem för sugslangar som aktiveras med ett enkelt knapptryck på sugarmen. Därefter desinficeras sugslangarna och man är klar för en ny patientbehandling. Under behandling kan sugslangarna desinfekteras kontinuerligt.

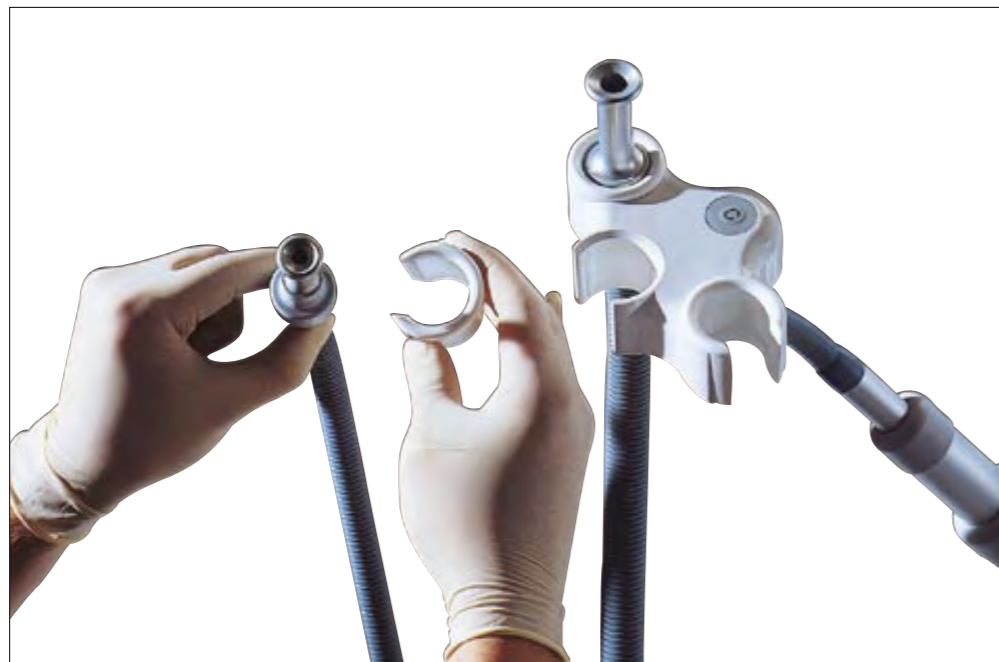


Uniclne kan levereras med regelbara sugmunstycken eller hygieniska aluminiumstycken. Uniclne har inbyggda partikelfällor som standard. Inga filter att rengöra.

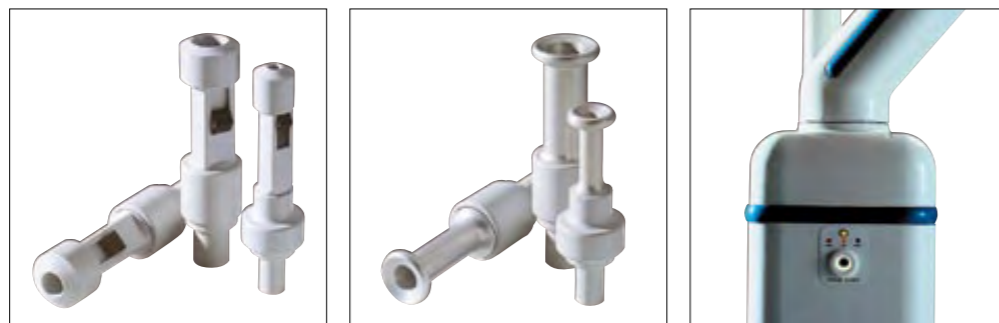

Flexibilitet

Uniclne levereras med en flexibel teleskåparm med optimal inställning, oavsett om du arbetar ensam eller med assistent. Kan även levereras med flerfunktions bläster eller LC lampa.

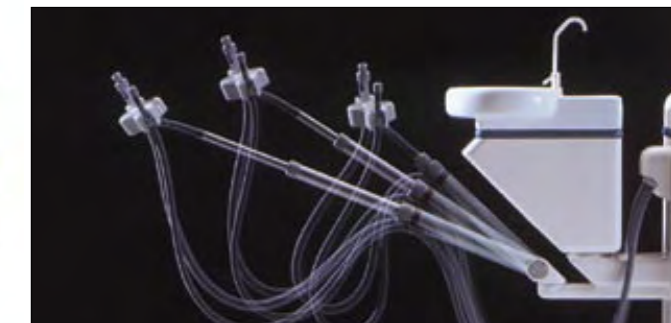

Platskomfort

Platskomfort Fontänenheten är svängbar och ger maximal platskomfort för både en och två assistenter. Fontänens överdel demonteras enkelt.





Armstöd

UnicLine patientstol kan mot tillägg levereras med ett eller två armstöd, som lätt kan tagas av.



Joystick

Valfri placering av upp till 3 individuella fotkontroller säkrar optimal patientinställning för dig och din assistant.



Lät rengöring

UnicLine klädseln är lätt att rengöra.



Valfrihet

UnicLine patientstol leveras som standard med klädsel i 9 färger, och som tillval med supersoft klädsel i 4 färger.


Patientkomfort

Kompensation i rygg och sits, samt det integrerade arm och svankstödet, säkrar att patienten sitter eller ligger bekvämt under hela behandlingen.



Stabil position

Det dubbelledade nackstödet ger en mångsidig, säker och stabil position av patientens huvud. För barn och vuxen.

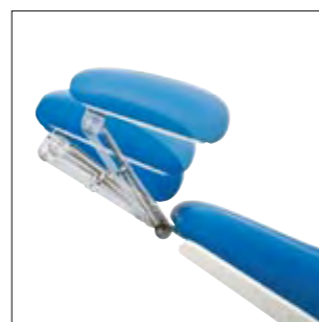



UnicLine Mobile - komplett enhet

Fullt utrustad för såväl mobil
som stationär tandvård.

Instrumentbord med dubbla mikromotorer,
trefunktionsspruta, scaler och hårdljuslampa.
Unitskåpet innehåller sug med amalgamavskiljare,
kompressor samt separata behållare
för färsk- och avloppsvatten.
Behöver endast anslutas till 220V eluttag.



22

Unit, operationstol,
röntgen, brickbord och
operations-
belysning



23

heka*dental*[®]



Heka Dental A/S
Baldershøj 38
DK-2635 Ishøj, Denmark
Phone +45 4332 0990
Fax +45 4332 0980
mail@heka-dental.dk
www.heka-dental.com

Framtid

Kontakta din lokala leverantör eller tekniker och se de många flexibla möjligheter UnicLine erbjuder.

Svensk Dentservice:

Blömer Dental, Bromölla	tel. 0456-39833	Mälardalens Dentservice, Kvikksund	tel. 016-480471
Dentservice i Sörmland, Nyköping	tel. 0155-52009	Nerikes Dentservice, Vintrosa	tel. 019-296094
Dentservice Syd Ost, Ankarsrum	tel. 0490-50901	PreVeDent Dentservice, Hägersten	tel. 0705-283516
Kjell Gannby Dental, Hässleholm	tel. 0451-32070	Teknident, Bagarmossen	tel. 08-6597809
Göteborgs Dentservice, Göteborg	tel. 031-813060	TS Dental Sales, Vännäs	tel. 0935-13111
Gotlands Dentservice, Visby	tel. 0498-262090	Uppsala Dental och Allkonsult	tel.070-76 82 036

Kommunikator 23735 9/08 SV

Förbehåll för tekniska ändringar och färger.

