

Höstkampanj!

Köp 3 - få en 4:e. Mixa & matcha som du vill.



NYHET!

Surgic Pro2



NYHET!

Ti-Max Z-Micro



Höstkampanj

Köp 3 produkter från NSK - få en 4:e på köpet!



TS DENTAL

NSK Premiumserie


Z-serien turbinvinkelstycken

Z-serien består av eleganta kraftfulla turbinvinkelstycken med en maxeffekt på 26W. Instrumenten är tillverkade i titan som är ett slitstarkt, lätt, greppvänligt, vibrationsdämpande och allergivänligt material. Små huvuden med anpassad vinkel och smala halsar ger optimal åtkomst och sikt. Ljudnivå och vibrationer är minimerade och ytan är behandlad med NSK Duragrip för ett säkert och bekvämt grepp.

Clean Head System

TRYGG+
PLUS-GARANTI
Z-SERIEN 2 ÅR

Styrka i världsklass

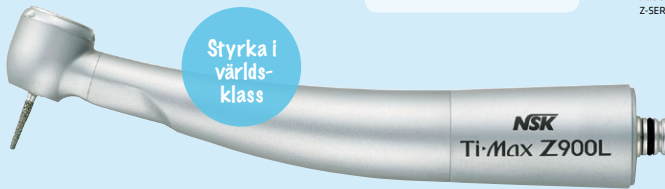

Z900L Standardhuvud



Z800L Mindre huvud



Z900KL Standardhuvud

**Köp 3
NSK-produkter
– få en 4:e! ***
Mixa & matcha
som du vill.

Kopplingar

Z-seriens turbinvinkelstycken finns i versioner för:

- LED-koppling för instrument med NSK-fattning.
- LED-koppling för instrument med KaVo-fattning.
- Sirona Quick Coupling
- W&H Roto Quick
- Bien-Air Unifix

Fyrportspray, Dubbla jetmunstycken, Clean Head System, kompakt glasstav och keramiska kullager är standard i NSK:s turbinvinkelstycken. Den patenterade backventilen (inbyggd i både NSK- och KaVo-kopplingen) förhindrar återsug av orala substanser.

NSK Clean Head System förhindrar återsug av kontaminerande aerosoler och andra smutspartiklar.

Z-serien lågvarv

Instrumenten i Z-serien sätter en helt ny standard för lågvarvsvinkelstycken. Den optimala utformningen ger dig ännu bättre åtkomst och sikt än något lågvarvsvinkelstycke tidigare.

Med ultra-minihuvuden och de smalaste halsarna någonsin när du svåråtkomliga behandlings-områden. Ljudnivån är reducerad till lägsta möjliga och vibrationerna knappt märkbara. Z-serien är tillverkad i titan och ytbehandlad med NSK Duracoat som ger ett greppvänligt och tåligt instrument.

*Produkten med lägst pris gratis, gäller inte förbrukning/tillbehör eller reservdelar.

Clean Head System

TRYGG+
PLUS-GARANTI
Z-SERIEN 3 ÅR



Switch

Z95L

- Fyrportspray
- Uppväxlad 1:5
- För FG borrar
- Max 200 000 v/m



Mini med fyrportspray

Z84L

- Minihuvud
- Fyrportspray
- Uppväxlad 1:5
- För FG borrar
- Max 200 000 v/m



Z25L

- Direktväxlad
- För VST borrar
- Max 40 000 v/m



Z15L

- Nedväxlad 4:1
- För VST borrar
- Max 10 000 v/m



Z10L

- Nedväxlad 16:1
- För VST borrar
- Max 2 500 v/m



Minihuvud

Z24L

- Minihuvud
- Direktväxlad
- För VST borrar
- Max 40 000 v/m



Switch

Z45L

- Uppväxlad 1:4.2
- För FG borrar
- Max 168 000 v/m

Z45L för optimal åtkomst av molarer

Med Z45L når du svåråtkomliga kindtänder som vanliga vinkelstycken inte kommer åt. Z45L kan användas med både kort och lång borr. Sprayen kan justeras från dimma till jet.

NYHET!

Ti-Max Z-Micro

Hög prestanda i ett litet turbinvinkelstycke!

Clean Head System

TRYGG+
PLUS-GARANTI
Z-SERIEN 3 ÅR



Huvudet på NSK Z Micro är endast 9 mm i diameter och 10.8 mm i höjd. Ändå kan det leverera hög torque, 20W. NSK Micro har en 100-gradig vinkel genom vinkelstyckskroppen vilket ger en utomordentlig åtkomst även till molarerna. Micro är utrustad med Clean Head System som förhindrar retraktion av orala substanser samt effektiv kylning med 4-portspray.

Köp 3
NSK-produkter
– få en 4:e! *

Mixa & matcha
som du vill.

*Produkten med lägst pris gratis, gäller inte förbrukning/tillbehör eller reservdelar.

SDC-G5-ProLign

Ett system för interproximal reduktion vid arbete med ortodonti och aligners. Steriliserbara och kalibrerade filar.



I erbjudandet ingår:

- 1000 OrthoKit G5 ProLign
- NSK X55 reciprocande vinkelstycke.

Minskad aerosolspridning med the Switch

Mycket forskning återstår innan vi vet tillräckligt om Covid-19 men som en extra försiktighetsåtgärd erbjuder NSK **Z95L** och **Z45L** – två "röda" uppväxlade vinkelstycken med en funktion som stänger av luften. Borren kyls då med jetstråle istället för spraymist, vilket innebär att dropparna inte finfördelas och inte får lika omfattande spridning.


Switch



Turbinvinkelstycke




Lågvarv spraymist

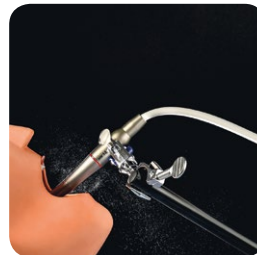

Z95L Switch jetstråle

Clean Head System och det **inbyggda microfiltret** stoppar återsug av aerosoler och andra partiklar vilket hjälper till att förhindra kontaminering av unitens vattenledningar.

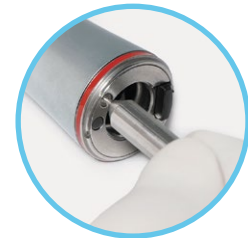

Genom att vrida om en skruv på bakstycket ändras läget från vanlig kylning genom spraymist till en vattenstråle med optimal anpassning för att kyla borren.

Certifierad verkstad med TryggPlus-garanti

TS Dental är det enda företag som är auktoriserat av NSK Nakanishi att importera och distribuera NSK:s dentala produkter i Sverige. Våra servicetekniker är certifierade och 99% av alla reparationer utförs på vår verkstad i Sverige. Vi erbjuder en TryggPlus-garanti för vinkelstycken som, förutom tillverkningsfel, täcker skador som uppstått på grund av slitage, trauma eller felaktig skötsel. Vill du handla tryggt handlar du av oss eller någon av våra återförsäljare.

Beställ din servicepåse på tsdental.se



NSK Standardserie

S-Max M-serien turbinvinkelstycken

NSK:s standardserie har mycket hållbara interna komponenter och chucksystem för enkelt och säkert borrarbyte samt en slimmad design för att möta önskemål om att mer obehindrat nå molarerna. Instrumenten når hela 26 W i effekt, samtidigt som vibration och ljudnivå är låg. Höljet i S-Max-serien är tillverkad i rostfritt stål, den blästrade ytbehandlingen ger ett säkert grepp.

**Köp 3
NSK-produkter
- få en 4:e!***
Mixa & matcha
som du vill.


Clean Head System

TRYGG+
PLUS-GARANTI
M-SERIEN 1 ÅR

*Produkten med lägst pris gratis, gäller inte förbrukning/tillbehör eller reservdelar.



M900L Standardhuvud

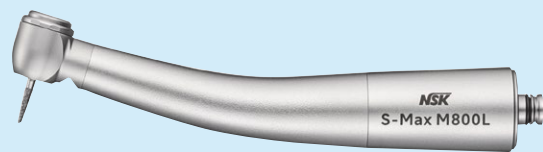

M800L Minihuvud



M900KL Standardhuvud

Kopplingar

NSKs turbinvinkelstycken finns i version som passar för alla kända kopplingar.

Clean Head system, Tryckknappschuck, Fyrportspray och keramiska kullager är standard i NSK:s S-Max serie. Den patenterade backventilen (inbyggd i NSK-kopplingen) förhindrar återsug av orala substanser.

NSK Clean Head System förhindrar återsug av kontaminerande aerosoler och andra smutspartiklar.



M800KL Minihuvud

S-Max M lågvarv

S-Max lågvarvserie är driftsäker, har hög prestanda och interna komponenter med mycket hög hållbarhet. Designen är slimmad. Chucksystemet gör borrarbytet enkelt och säkert. M95-, M25- och M15-vinkelstycken finns både med och utan ljus, M65 finns enbart utan ljus.

TRYGG+
PLUS-GARANTI
M-SERIEN 1 ÅR

Clean Head System

Clean-head-system och kompakt glasstav är standard i S-Max M-serien lågvarv. M95L har dessutom keramiska kullager och fyrportspray.



M95L

- Fyrportspray
- Uppväxlad 1:5
- För FG borrar
- Max 200 000 v/m



M25L

- Direktväxlad
- För VST borrar
- Max 40 000 v/m



M15L

- Nedväxlad 4:1
- För VST borrar
- Max 10 000 v/m



M65

- Direktväxlad
- För HST borrar
- Max 40 000 v/m



FX57

- Profylaxvinkelstycke
- Nedväxlad 4:1
- För skruvkoppar

Prophy-Mate Neo pulverpolerare

Blästrar skonsamt bort beläggningar och fläckar. Mycket lätt, minskar belastningen på händer och handleder. Klarar lång behandlingstid utan stopp. Ansluts på turbinkoppling.



Prophy-Mate Standardset

- Prophy-Mate handstycke • 2 munstycken • Borste och ståltråd för rengöring • Nyckel för skifte av munstycke

Perio-Mate För behandling av tandfickor

För skonsam rengöring av tandfickor och behandling av periimplantit. Rengör utan att skada mjukvävnad och rottytor. Ansluts på turbinkoppling.



Perio-Mate Standardset

- Perio-Mate handstycke • 1 flaska Perio-Mate pulver • Extra spetsar • Borste och ståltråd för rengöring • Nyckel för skifte av munstycke

Varios Combo Pro 3 i 1 Scaling, Prophy och Perio i samma maskin

En användarvänlig och tillförlitlig maskin som kombinerar skonsam scalarteknik med pulverblästring av tandytan. Med periopaketet som tillval kan även djupa fickor rengöras.

Med Varios Combo Pro är tandhygienistens maskinpark så gott som komplett

Piezo scalerhandstycke

Skonsam scaling som innebär mindre obehag för patienten.

Prophy

handstycke för pulverblästring

Avlägsnar effektivt smuts och missfärgningar från tandytan.

Perioenhet

tillvalshandstycke perio

För behandling i periodontala fickor. Med separat pulverbehållare - maskinen anpassar sig för subgingival pulverbehandling.



**Köp 3
NSK-produkter
- få en 4:e!***
Mixa & matcha
som du vill.

Varios Combo Pro Standardset

- Scalerhandstycke
- 3 scalerspetsar
- Prophyhandstycke
- 15 portionsförp. pulver
- Pulverbehållare
- Vätskebehållare
- Fotkontroll
- Sterilisationskassett

*Produkten med lägst pris gratis, gäller inte förbrukning/tillbehör eller reservdelar.

DentalOne Mobil utrustning

Lätt att packa upp och ned, enkel att förflytta. Dentalone är utrustad med sug och kompressor, funktionsdisplay, kolfri motor med led-ljus, scaler med led-ljus och kombinationsspruta med led-ljus samt inbyggd flaska för vattenförsörjning.



Leasa DentalOne

Månadskostnad:
1 981 kr

Beräknat på 5 år och 10% restvärde.

VIVA ace Mobil, bärbar utrustning

Vikt: 8,6 kg, snabb och enkel att starta upp.
Instrumenthållaren justerbar i fyra höjdlägen.



Micromotor: NLX Plus - kolfri micromotor med ett varvtalsområde på 1000-40000 v/min och ett vridmoment på 4.0 Ncm. Även Endo-Mode finns med 100-5000 v/m, torquebegränsningsmöjligheter och auto-reverse.

Scaler: Varios Scaler med endo, perio och general mode, tillgängligt över 70 spetsar.

Bläster: Lätt och smidig 3-funktionsbläster.

Sugsystem: Ett relativt starkt sugsystem med kapacitet om 90 l/min.



Leasa VIVA ace

Månadskostnad:
1 662 kr

Beräknat på 5 år och 10% restvärde.

Nya Surgic Pro2 är här!

Lika kraftfull och pålitlig som tidigare men med flera nya användbara features:

- Lättare och mindre motordel för minskad uttröttning av händer och handleder
- Enkel inställning och överblick av värden via den stora LCD skärmen
- Ny ljus teknik med färgLED bibehåller rätt ljusstyrka men ger en naturligare färgåtergivning än vit LED
- Trådlösa kopplingar via bluetooth: Trådlös fotkontroll, trådlös koppling till implantatstabilitetsmätare NSK 100+, och iPads.
- Med iPad kopplad kan värden liveövervakas och sparas. Enheten kan också kopplas trådlöst till NSKs piezokirurgimaskin VarioSurg3.



*Produkten med lägst pris gratis, gäller inte för brukning/tillbehör eller reservdelar.



SGL70M Micromotor med justerbart LED-ljus. NSK:s minsta och lättaste hittills.
Vridmoment: 80Ncm. **Varvtal:** 200-40.000 v/m.
 Finns även i version utan ljus.

Surgic Pro (230V) Standardset med vinkelstycke

- Kontrollenhet med vridmomentskalibrering
- SGL70M mikromotor med LED-ljus • Fotkontroll
- X-SG20L vinkelstycke med optik (nedväxlat 20:1)
- Kylvattenslang (5 st.) & andra tillbehör

Kirurgipaketet

består av SurgicPro, VarioSurg3 och iCart Duo kirurgivagn (en fotkontroll styr dubbla motorer).

Leasa kirurgipaketet

Månadskostnad: **1 763 kr**

Beräknat på 5 år och 10% restvärde.



iCart Duo

VarioSurg3

Kraftfullare än någonsin

Piezokirurgi är skonsamt för patienten. Nya VarioSurg3 har 50% högre prestanda än föregående modell för att effektivisera ingreppen. VarioSurg3 är användarvänlig med lätt och smidigt handstycke och enkel konsol.

LED-lampor ger optimal belysning i behandlingsfältet.



VarioSurg3 Standardset

- Kontrollenhet • Piezohandstycke med LED-ljus
- Fotkontroll • Spetskit med 6 st spetsar
- Sterilisationskasset

Kirurgivinkelstycken

X-serien för implantat Hand- och vinkelstycken i titan



X-DSG20L med ljus,
nedväxlad 20:1.

Enkelt montera isär vid rengöring.

X-SG20L med ljus,
nedväxlad 20:1.

X-SG25L med ljus,
direktväxlad 1:1.

X-SG93L med ljus,
uppväxlad 1:3.

Finns i version utan ljus.

X-SG65L med ljus,
direktväxlad 1:1.

Finns i version utan ljus.

**Köp 3
NSK-produkter
– få en 4:e!***

Mixa & matcha
som du vill.

*Produkten med lägst pris gratis, gäller inte förbrukning/tillbehör eller reservdelar.

Kirurgivinkelstycke

För implantat i zygomatiska
och pterygoida ben

S-Max-serien för implantat

I rostfritt stål, utan ljus



S-Max SG20
nedväxlad 20:1.
Tryckknapp.

Z-serien för implantat

Med 45° vinkel



Z-SG45L med ljus,
uppväxlad 1:3. I titan.
Finns i version utan ljus.

Kirurgihandstycken

Minimal vibration för optimal precision



SGS-ES
Rakt direktväxlat 1:1.
Finns i uppväxlad version 1:2.



SGA-ES Vinklat
handstycke 45 grader 1:1.
Finns i uppväxlad version 1:2.



SGX-E20R
Nedväxlad 20:1.
Vridchuck för låsning av borr.

NSK dubbeltätning eller NSK Clean Head System förhindrar återsug av kontaminerande aerosoler och andra smutspartiklar.

Osseo 100

Implantatstabilitetsmätare

Med Osseo 100 testas enkelt implantatstabiliteten och osseo-integrationen. Den ger ett tillförlitligt resultat så att du vet om implantatet kan belastas, något som är extra viktigt när t.ex. högriskpatienter behandlas.

Mätningen sker enkelt i tre steg: **1.** Skruva fast den medföljande mätpinnen på implantatets interna gängor. **2.** Sikta med Osseo 100 på av mätpinnen. **3.** Osseo 100 skickar en magnetisk puls som åstadkommer vibrationer i mätpinnen och utifrån det visas ett isq-värde mellan 1 och 99. Högre värde betyder högre stabilitet.



ISD900

Protetikskruvdragare

Med ISD900 drar du snabbt och säkert åt/lossar fixturs täckskruv. Momentbegränsningen kan ställas in från 10 till 40 Ncm, hastigheten kan ställas på 15, 20 eller 25 varv per minut. Vridmomentet kan kalibreras så att verktyget blir tillförlitligt. ISD900 stannar när angett torquevärde uppnåtts.

Ljudsignaler indikerar hur hårt du drar.

Tydlig display, enkel att ställa in, drivs av uppladdningsbara batterier.



ISD900 Standardset

- Skruvdragare
- Laddare
- Enhet för vridmomentkalibrering

Hygieniska tangentbord

Speciellt tillverkade för att användas i miljöer där det ställs stora krav på hygien.

Alla våra tangentbord kan rengöras och desinficeras på 10 sekunder mellan varje patient.

**Köp 2 Purekeys
tangentbord –
få en Purekeys
mus på köpet!**



Purekeys

Ett mycket användarvänligt mekaniskt tangentbord med helt slät silikon-
yta som är lätt att rengöra. Purekeys är tillverkad med vattensäker teknologi
(IP65), silikonytan torkas lätt av med valfritt desinfektionsmedel.

För enkel och effektiv rengöring finns en knapp som tillfälligt stänger av
tangentbordet.



Purekeys hygienisk mus

Desinficerbar mus täckt med en slät silikon-
yta som är enkel att rengöra.

Musen finns i både trådbunden och trådlös version.

Purekeys 400

Mekaniskt tangentbord med helt slät silikon-
yta som är lätt torkas av. Med upphöjd bakkant som ger fast
lutning på tangentbordet.

Purekeys 400 finns i både trådbunden och trådlös version.

NYHET!



Purekeys tangentbord och mus finns nu även i svart.



Active Key

Active Key är tangentbordet för dig som inte kommer överens
med den släta ytan på andra hygieniska tangentbord.

Knapparna är låga och gjorda i mjukt silikon så det går bra att
torka av och desinficera – man kommer åt även mellan knapparna.

Finns även i trådlös variant.

Se www.tsdental.se för våra övriga tangentbord och möss.

Våra erbjudanden gäller inte i kombination med avtalspriser eller andra rabatter. De gäller t.o.m. 31/10 -21 och gäller även hos Svensk Dentservice. Alla priser är exkl. moms.


TS DENTAL

TS Dental är svensk generalagent för NSK
Box 37, 911 21 Vännäs, Tel. 0935-131 11, info@tsdental.se, www.tsdental.se


**Svensk
Dentservice**

Sortimentet i katalogen kan även köpas via
Svensk Dentservice / www.dentservice.se